



If caregivers have a choice, they choose Lopital



Lotus, ayuda activa para levantarse



5900 8200 Lotus / 5900 8250 Lotus compact

Lotus, ayuda activa para levantarse

Lotus, ayuda activa para levantarse con extensión mecánica de piernas.

El Lotus es una ayuda activa para ponerse de pie diseñada para personas que aún pueden ponerse de pie de manera independiente y tienen suficiente estabilidad en el núcleo, pero pueden tener dificultades para caminar o no pueden hacerlo. Los cuidadores pueden mover al cliente de manera segura y eficiente después de que se hayan sentado en el Lotus.

El Lotus está destinado para transferencias cortas, como moverse de la cama al baño. Debido a que el cliente asume una posición sentada activa, se requiere menos esfuerzo para volver a ponerse de pie. Se proporciona un confort óptimo tanto para el cliente como para el cuidador. El Lotus cuenta con componentes de asiento giratorios, un cómodo soporte para las piernas y una función de separación de las piernas. La función de separación de las piernas permite acercar el Lotus al cliente, lo que les permite sentarse activamente. El Lotus anima al cliente a participar activamente en las transferencias, lo que ayuda a entrenar los músculos y promueve la independencia.

El Lotus está diseñado para usuarios con una altura promedio entre 1,60 y 1,95 metros.

El Lotus compact está diseñado para usuarios con una altura promedio entre 1,30 y 1,65 metros.



- Capacidad máxima de carga de 200 kg
- Secciones de asiento giratorias
- Extensión mecánica de las piernas
- Bloqueo de ruedas
- Puntos de contacto variables
- Soportes cómodos para las piernas inferiores
- Ángulo de asiento ideal
- Asa de maniobra conveniente
- Articulaciones giratorias suaves
- Placa de pie resistente
- 2 ruedas de plástico giratorias bloqueables
- Soporte de piernas ajustable en altura
- Recubrimiento antibacteriano en el marco.
- Acabado liso para una limpieza y desinfección óptimas.

5900 8200 Lotus





Adecuado para personas con una discapacidad leve a moderada.



5900 8250 Lotus compact



Piezas de asiento giratorias.



Expansión mecánica de la base.



Puntos de contacto variables.



Bloqueo de ruedas.




Oporte cómodo para las piernas inferiores.

Especificaciones técnicas


Product no.	Descripción del producto	Material	Capacidad de carga kg	Capacidad de carga lbs	Longitud x ancho x altura	Ancho de las patas	Extensión mecánica de la base	Peso en kg	Peso en lbs	Longitud del cliente
5900 8200	Lotus	robar	200	440	96 x 68 x 110	68	68 - 96	32	77	1,60 - 1,95 m
5900 8250	Lotus compact	robar	200	440	96 x 68 x 101	68	68 - 96	32	77	1,30 - 1,65 m

Todas las medidas en esta matriz están en centímetros.

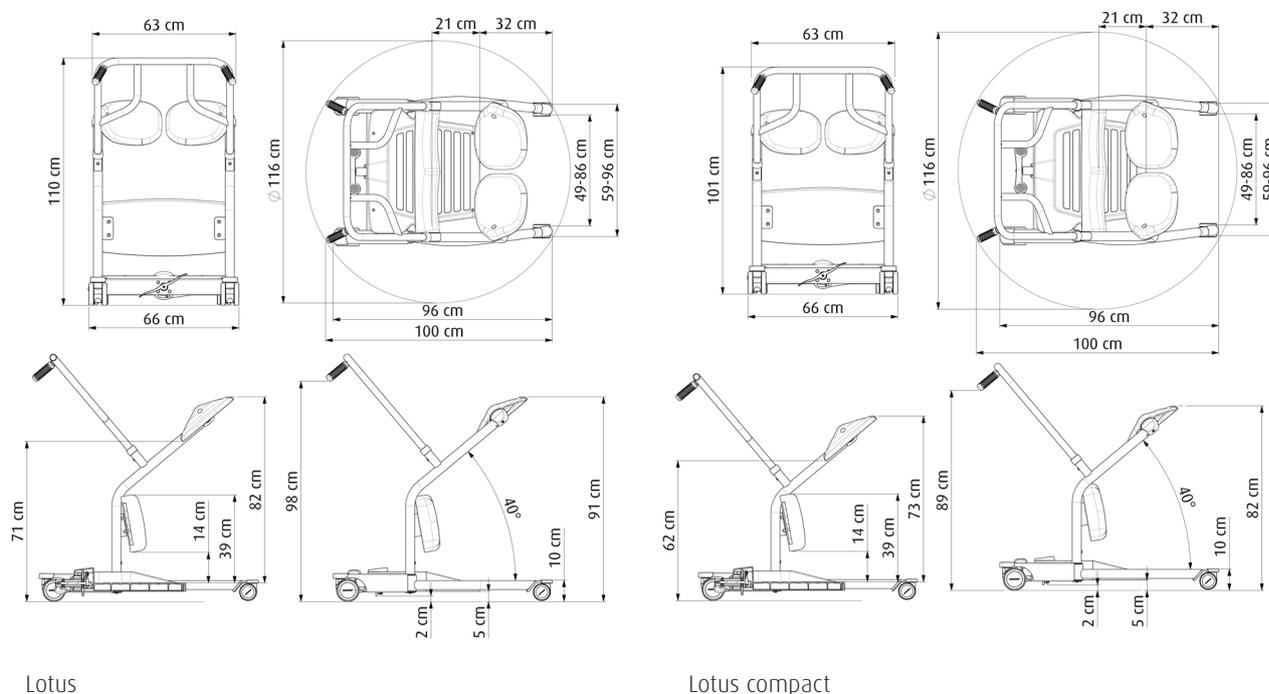

Lotus

Lotus compact

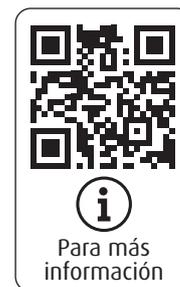

Para obtener más información, visite también nuestro sitio web: www.lopital.com

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk, The Netherlands
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.com

Todos los dispositivos producidos por Lopital cumplen con las normativas aplicables para dispositivos médicos Clase 1 (MDR (EU) 2017/745).

